

编制日期：2024 年 04 月

版 本 号：第一版

压缩空气式雾化器说明书

【产品名称】压缩空气式雾化器

【产品注册证号】苏械注准 20222081012

【产品技术要求编号】苏械注准 20222081012

【生产许可证号】苏药监械生产许 20220116 号

【产品型号】W201A、W201B、W202A、W202B、W203A、W203B 各型号间具体差异如表一所示：

表一：压缩空气式雾化器各型号信息表

机型	颜色搭配	简易雾化装置	全套雾化装置
W201A	白灰色		0
W201B	白灰色	0	
W202A	白黄色		0
W202B	白黄色	0	
W203A	白蓝色		0
W203B	白蓝色	0	

【主要结构和性能】雾化器由压缩机、机壳、雾化装置组成。雾化装置（采购有证医疗器械）包括雾化杯、连接管、咬嘴、面罩。压缩空气结构示意图见图 1、雾化装置结构示意图见图 2

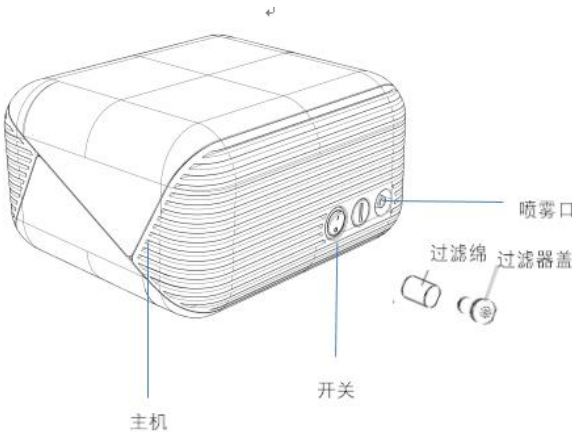


图 1 压缩空气式雾化器结构图

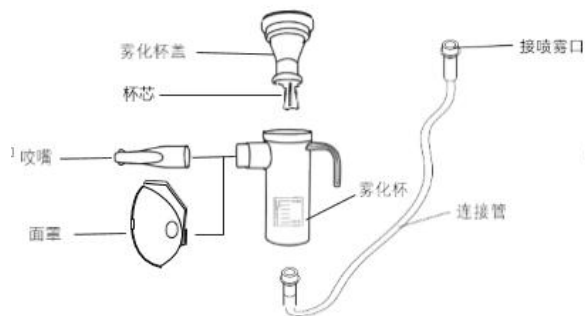


图 2 雾化装置结构示意图

【产品描述】

- 1、本产品以压缩泵产生压缩空气为驱动使药液形成雾化。
- 2、输入电压：AC220V $\pm$ 10%
- 3、输入频率：50Hz $\pm$ 1Hz
- 4、最大雾化率： $\geq$ 0.2mL/min
- 5、药液残留量： $\leq$ 1.0mL
- 6、雾化器所产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围是 0.06~0.13MPa，当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是 0.15~0.4MPa。
- 7、熔丝管：T1.6AL250V， Φ 3.6 $\times$ 11
- 8、雾化器自由空气流量： $\geq$ 5L/min。
- 9、噪音： $\leq$ 60dB(A)
- 10、净重： $\leq$ 1.6kg
- 11、外形尺寸：长约 17cm $\times$ 宽约 15cm $\times$ 高约 9.8cm
- 12、输入功率：200VA
- 13、雾粒等效体积粒径：3.9 μ m $\pm$ 25%。★

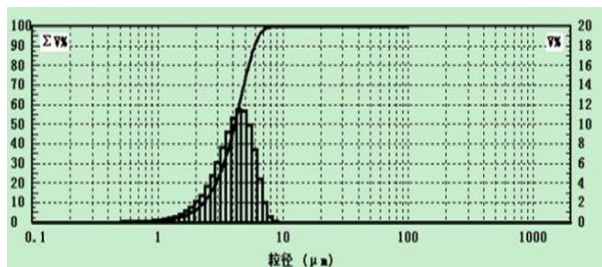


图 3 粒径图

- 14、正常工作条件：
环境温度范围：5℃~+40℃

相对湿度范围：30%～75%

大气压力范围：86kPa～106kPa

15、运输和贮存环境限制条件：

环境温度范围：-20℃～+40℃

相对湿度范围：15%～93%

大气压力范围：86kPa～106kPa

16、安全程度分类：不能在有与空气混合的易燃麻醉气体或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备

17、防电击类型分类：Ⅱ类设备

18、防电击程度分类：B 型应用部分

19、进液防护等级：IPX0

20、运行模式：连续运行（连续工作 4 小时以上）

※测试条件：环境温度在20℃ 湿度53% ，与出雾口测试距离为10cm测试溶液：0.9%生理盐水（随测试条件、药液变化而变化，规格如有变更，恕不另行通知）

【工作原理和作用机理】

工作原理：压缩空气式雾化器应用的是文丘里效应原理，主机采用无油润滑单缸活塞泵产生的压缩空气作为驱动源来产生及传输气雾的。压缩机产生的压缩空气从喷雾口喷出时，通过喷雾口与连接管之间产生的负压作用，向上吸起药液。吸上来的药液冲击到上方的杯芯，变成极细的雾状向外部喷出。工作原理示意图如图 4

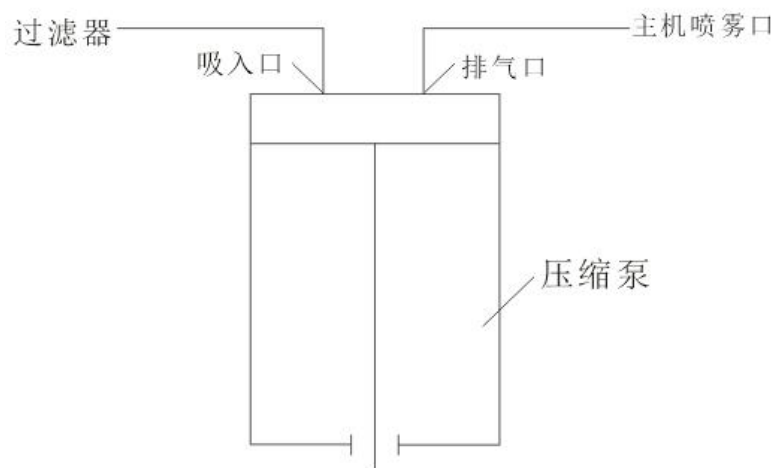


图 4 工作原理示意图

作用机理：呼吸系统是一个开放的系统，药液在被雾化为微粒后，患者吸入这些药雾后，药雾能直接吸附于患者的口腔、咽喉、气管、支气管、肺泡等处，经其粘膜吸收而达到治疗

的目的。

【适用范围】

用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。

【使用方法】

为了确保用户对本产品的正确使用，请仔细阅读本说明书并严格按说明书的使用要求，进行操作。如有疑问，请与供应商或制造商联系。

1、开箱准备

用户在安装、调试产品前，首先检查产品的外观是否良好，附件的品种、数量是否和说明书后的附件清单一致。如有缺损，请及时与供应商或制造商联系。

2、雾化装置的加药及安装方法

打开雾化杯盖，遵照医嘱，将适量药物倒入雾化杯内，不要超过最大刻度线。旋上雾化杯盖，连接咬嘴（面罩）。

注意：初次使用前，请先对雾化装置清洗和消毒。关于药液的种类、用法请遵医嘱。雾化杯上的刻度仅作为参考目标。计量药液时，请使用精度更高的注射器或计量器。将药液注入雾化杯后，请妥善放置雾化杯，请勿携带，防止雾化杯倾倒导致药液流出。

3、操作步骤

接通主机电源，打开电源开关，待主机正常工作 1~2 分钟后，连接主机，喷雾口与雾化杯间连接管，遵照医嘱，进行雾化治疗，可根据使用情况旋转雾化杯盖调节雾量的大小。见图 5



图 5

注意：

- ① 治疗时，使用咬嘴治疗时，将咬嘴含入口腔，微闭嘴唇即可。使用面罩治疗时，将面罩贴于面部即可。
- ① 请勿超过 45 度以上的角度倾斜雾化杯组件。否则可能会导致药物流入口中或无法有效的喷雾。
- ① 使用过程中感觉到任何异状时，请立即停止使用，并向主治医生咨询。
- ① 取下面罩后请务必将脸擦干净，不要让药液残留在脸上。

- ① 雾化过程中请检查是否还有清晰可见的雾从雾化杯排出，一旦出现不规则喷雾，立即停止治疗。
- ① 请勿使用破损的雾化杯、咬嘴、面罩以及连接管。
- ① 喷雾过程中，除了进行切断电源等必要操作之外，请勿触碰主机。使用时确保电源插头必须完全插入电源插座。
- ① 请勿用湿手插、拔电源插头。
- ① 拔电源时，请勿直接拉扯电源线，请握住电源插头将其拔出。

4、保养

①清洗

通过在每次使用前、每次使用后清洗部件，可防止因雾化杯中残留的药液干燥而导致的无法有效喷雾，并防止感染。

首先确认电源开关处断开位置，然后从电源插座中拔出电源插头。从喷雾口拔下连接管，拆下咬嘴（面罩），旋下雾化杯盖，倒空雾化杯内残余药液。

1) 雾化杯、面罩、咬嘴

用纯净水冲洗或浸没在温水中 15 分钟，为了清洗更卫生，可在水中加入适量 75%医用酒精，然后放在干净的场所进行自然干燥。

2) 主机、连接管

请用水中浸湿的软布进行擦拭。

3) 去除连接管内水分的方法

- a) 请确认连接管连接在主机上。
- b) 从雾化杯上卸下连接管。
- c) 接通主机电源开机，用手指重复开闭连接管端口，以排出水滴。

注意：

- ① 使用后请务必废弃掉残留的药液，每次都必须使用新的药液。
- ① 清洗完毕后，须待所有附件晾干后再存放在干净的场所。
- ① 请勿在内部还有水分的状态下保管连接管。

②消毒


请务必在每次使用后对部件进行消毒。如果部件污染严重，请及时更换新的部件，消毒方式有如下两种：

1) 使用 75%医用酒精，请遵照 75%医用酒精的使用说明书所述的注意事项进行操作。

- a) 将部件浸在 75%医用酒精中并保证消毒 5 分钟时间。
- b) 用干净的温水冲洗，然后放在干净的地方进行自然干燥。并置于清洁场所存放。

注意：

- ① 将雾化装置从 75%医用酒精中取出后，用洁净的水充分清洗，注意避免酒精残留。
- ① 在容器中加入足够的水，放入可以煮沸消毒的部件，加热煮沸 15~20 分钟，煮沸后，将部件小心取出，去除多余的水分，放在干净的场所自然干燥。

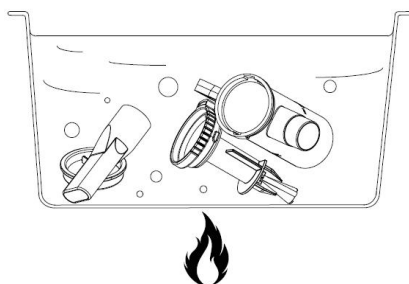

注意：

- ① 不可煮洗或沸水清洗连接管、过滤片、过滤片盖等附件，以防受热变形。
- ① 进行消毒处理时，请确认雾化杯里的药液已经倒空。
- ① 煮沸消毒时，请注意不要在没有水的情况下空烧。

5、过滤棉、雾化装置、熔丝管的更换

① 过滤棉

一般来说，过滤棉每使用三个月更换一次，如发现过滤棉潮湿，需完全晾干后再使用。更换时，拉出主机上过滤器盖，然后更换。

注意：

- ① 使用前，请确认过滤棉及过滤器盖已正确安装。
- ① 安装前请确认过滤棉是否干净，是否未沾灰尘。
- ① 为防止堵塞，请采用水洗等方法定期清洗过滤器盖（不可煮沸），自然干燥后再正确装上。
- ① 请使用专用过滤棉，请勿在未安装过滤棉的状态下使用。

② 雾化装置

建议雾化装置使用三个月后更换一次，如雾化装置出现损坏或不能正常出雾，需要更换新的雾化装置。雾化装置更换使用另见雾化装置的加药及安装方法。

③ 熔丝管

本机熔丝管包含在内部电源线上，如有损坏请及时与供应商联系维修。

6、维护与保养及注意事项

注意：

- ① 请勿在连接管发生弯曲的状态中使用和保存。
- ① 请勿让主机、雾化装置跌落或受到强烈冲击。
- ① 请勿对雾化装置施加外力使其变形。
- ① 请勿用针或尖锐的物体戳雾化装置。
- ① 请勿拆卸主机或尝试维修。
- ① 请勿在浴室等潮湿的场所使用和保管。
- ① 请勿将主机或其他部件放在极端高温、低温或阳光直射的场所。
- ① 请勿使用挥发油、稀释剂等擦拭主机、连接管等。
- ① 存放时，需远离儿童，因为其中包含可能被吞入的小部件。
- ① 进行保养前，请先拔出电源。存放时不要折瘪连接管。
- ① 长期不使用时，请拔下电源插座。存放时，须远离儿童。

① 一般安全注意事项：

- 1) 每次使用前请检查主机和附件，确认是否存在任何问题，尤其注意如下内容：
 - a) 喷嘴部和连接管没有损坏。
 - b) 喷嘴部分的孔没有堵塞。
 - c) 主机可以正常工作。
- 2) 使用过程中，主机内的泵会发出噪音和振动。从雾化装置喷出的压缩空气在排放时也会有噪声，这些都属于正常现象。
- 3) 使用过程中主机温度可能会升高。
- 4) 请勿将本产品用于吸入治疗以外的用途。
- 5) 请勿在+40℃以上的温度环境中使用。
- 6) 请确认连接管已正确安装在主机和雾化杯之间，而且不存在任何松动。

- 7) 使用完毕后为了与电源完全断开，请从电源插座中拔出电源插头。
- 8) 主机使用期限：5年（易损易耗件除外）。如使用产品过程中出现意外，应立即拨打急救热线并寻求专业医护人员的帮助。
- 9) 此说明书中所有的注意与警告，用于正确安全使用产品，防止对用户或他人造成危害或带来损害。警告与注意的内容如下：

图例	内容
	表示错误使用时，有可能发生人员伤亡或物品损坏
	① 记号表示强制（必须遵守的事情）。具体强制内容在①中或者附近文字或图画表示。左图表示“一般强制”
	⊘ 记号表示禁止（不允许的事情）。具体禁止内容在⊘中或者附近文字或图画表示。左图表示“一般的禁止”

- ① 关于药液的种类、用法请遵医嘱，昏迷、浓痰患者请遵医嘱使用。
- ① 购买后初次使用前，请对雾化装置进行清洗和消毒。
- ① 长期未使用时，使用前请务必对雾化装置进行清洗和消毒。
- ① 配套的雾化装置为非一次性使用产品，多人使用本产品时，请更换配套的一次性使用雾化装置(请务必更换雾化杯和咬嘴或面罩)，否则可能引起交叉感染。
- ⊘ 进行主机或部件干燥时，请勿使用微波炉、餐具干燥器、电吹风。
- ⊘ 请勿使用高压蒸汽灭菌器、EO 气体灭菌、低温等离子灭菌进行灭菌。
- ⊘ 请勿在内部还有水分的状态下保管连接管。
- ⊘ 请勿将手指或任何其他物体塞入主机中。
- ⊘ 请勿用水进行雾化吸入。
- ⊘ 使用中，请勿将毛毯或毛巾等覆盖在主机上。
- ⊘ 请勿用于人以外的其他动物。
- ⊘ 请勿在含有易燃、易爆气体的场合使用。
- ⊘ 请勿在含有毒气体或挥发性气体的环境中使用或保管。
- ⊘ 请勿在麻醉回路或通风呼吸回路中使用。
- ⊘ 请勿堵塞通风口，请勿将主机放置在使用过程中通风口可能会被堵塞的场所。
- ① 当用于婴幼儿或无法表示自己意志的人时，在无人照顾的情况下请勿使用。存放或使用时防止婴幼儿、精神病患者触及。
- ② 关于电源的注意事项
 - ⊘ 使用前请将电源插头的灰尘擦干净。
 - ⊘ 请勿使用已损坏的电源线。
 - ⊘ 请勿将电源线缠绕在主机上。
 - ⊘ 长时间不使用时，请拔出电源线。
 - ⊘ 使用过程中发生停电时，请立即切断电源开关。
 - ⊘ 使用后和清洗保养前请务必拔出电源线。
 - ① 主机、开关和电源线都未经防水处理，请勿向其泼洒水或其他液体。洒落药液时，请立即用纱布擦净。

7、本机中有关安全要求的符号及其含义

符号	含 义	符号	含 义
	交流电		B型应用部分
	II类设备		接通(总电源)
	断开(总电源)		无防护
	注意! 查阅随机文件		向 上
	易碎物品		怕 雨
	电子信息产品污染控制标志环保使用期限为5年, 易耗品不包含在内		

【电磁兼容说明】

本产品（下文“本产品”代指压缩空气式雾化器）符合安全使用医用电气设备要求的 EMC（电磁兼容性）标准和 YY0505-2012。EMC 标准是为了安全使用医用电气设备而制定的标准，该标准规定应将设备产生的电磁波对其他设备的干扰、以及其他设备（手机等）发出的电磁波干扰控制在一定的范围内。YY0505-2012（5.2.1.1 项）中规定了需向使用者提供设备安全运行的 EMC 环境相关的详细信息，下面是对 EMC 相关技术说明的描述。（详情请参照 YY0505-2012。）

本产品在此 EMC 技术资料中所定的电磁环境工作时，其使用范围所述基本性能不受其影响。

■ EMC（电磁兼容性）的定义

EMC（电磁兼容性）是指满足以下两方面要求的能力。

- 不会对附近的其他电子设备发出容许之外的电磁干扰声。（辐射）
- 设备在有其他电子设备发出噪声等的干扰的电磁环境中能正常发挥其功能。（抗扰度）

■ EMC（电磁兼容性）相关的技术说明

医用电气设备需要有关 EMC 的专门提示，应根据以下描述的 EMC 信息进行使用。

- 本产品需要有关电磁兼容性（EMC）的专门提示。请根据本手册描述的 EMC 信息进行使用。
- 便携式和无线射频（射频）通信设备可能影响本产品。
- 请勿将本产品与其他设备相邻或叠放使用。（通信时除外。）
- 不可使用除专用附件以外的产品。否则可能导致辐射增加，抗扰度降低。

压缩空气式雾化器基本性能的功能为：雾化功能正常，雾化速率： $\geq 0.2\text{ml/min}$

表 1—准则及制造商声明—电磁辐射—

使用指南与制造商声明——电磁发射		
本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用		
发射试验	符合性	电磁环境——指南
射频发射 GB4824	1 组	本产品仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小。
射频发射 GB4824	B 类	本产品适用于在所有设施中，包括家用设施和直

谐波发射 GB17625.1	A 类	连接到家用住宅公共低压电网。
电压波动/闪烁发射 GB17625.2	符合	

表 2—准则及制造商声明—电磁抗扰度—

使用指南与制造商声明——电磁抗扰性			
本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用			
抗扰度试验	IEC60601 试验电平	符合电平	电磁环境——指南
静电放电 GB/T 17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应是木质、混凝土或瓷砖。如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少 30%。
电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4	±2 kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线	±2 kV 对电源线 /	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。
浪涌 GB/T 17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	±1 kV 线对线 /	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11	<5% U_T ，持续 0.5 周期 (在 U_T 上，>95% 的暂降) 40% U_T ，持续 5 周期 (在 U_T 上，60% 的暂降) 70% U_T ，持续 25 周期 (在 U_T 上，30% 的暂降) <5% U_T ，持续 5s (在 U_T 上，>95% 的暂降)	<5% U_T ，持续 0.5 周期 (在 U_T 上，>95% 的暂降) 40% U_T ，持续 5 周期 (在 U_T 上，60% 的暂降) 70% U_T ，持续 25 周期 (在 U_T 上，30% 的暂降) <5% U_T ，持续 5s (在 U_T 上，>95% 的暂降)	网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果本产品的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐本产品采用不间断电源或电池供电。
工频磁场 (50/60Hz) GB/T 17626.8	3A/m	3A/m	工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。
注： U_T 指施加试验电压前的交流网电压。			

表 3-准则及制造商声明-电磁抗干扰-

使用指南与制造商声明——电磁抗扰性			
本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/17626.6 射频辐射 GB/17626.3	3V（有效值） 150kHz~80MHz 3V/m 80MHz~ 2.5GHz	3V（有效值） 3V/m	便携式和移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近本产品的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80\text{MHz} \sim 800\text{MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800\text{MHz} \sim 2.5\text{GHz}$ 式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位； d——推荐的隔离距离，以米（m）为单位。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场勘测^a来确定，在每个频率范围^b都应比符合电平低。 在标志下列符号的设备附近可能出现  干扰。
注 1：在 80 MHz 和 800 MHz 频率点上，采用较高频段的公式。 注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和发射的影响。 ^a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得本产品所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整本产品的方向或位置。 ^b 在 150kHz~80MHz 整个频率范围，场强应低于 3V/m。			

表 4—便携式和移动式射频通信设备与设备过本产品之间的推荐间隔距离—

便携式及移动式射频通信设备和本产品的推荐隔离距离			
本产品预期在辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和本产品之间最小距离来防止电磁干扰			
发射机的最大额定输出功率 W	对应发射机不同频率的隔离距离/m		
	150kHz~80MHz $d=1.2 \sqrt{P}$	80MHz~800MHz $d=1.2 \sqrt{P}$	800MHz~2.5GHz $d=2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23
对于上表未列出的发射机最大额定输出功率，推荐隔离距离d，以米（m）为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在80MHz和800MHz频率点上，应采用较高频范围的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。			

【售后服务及其他】

售后服务

1. 本产品自出售之日起一周内出现非人为因素的质量问题，本公司负责包退、包换、包修；在正常使用和保管情况下，本产品自出售之日起一年内出现质量问题，本公司将给予免费维修；产品自出售之日起一年后出现质量问题，用户可根据发票和保修卡到本公司售后服务部、办事处或经销商处，本公司提供零部件给予维修，合理收费。如用户无法提供发票，以本公司器号或出厂日期延长一个月认定。
2. 以下情况不属于保修范围：①易损易耗品：过滤棉、雾化装置；②擅自拆卸、修理、改造该产品而造成的故障；③在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障；④使用不当造成的损坏；⑤用户造成水、药物等液体吸入泵内不能正常工作；⑥没有按照说明书正确方法操作而造成的故障；⑦不可预见的自然灾害（如：水灾、地震、火灾等）所造成的损坏。
3. 如需要，可提供电路图及修理所必需的资料，电气线路的检修如有疑难问题，可与制造商联系。

常见故障分析与排除

序号	故障现象	原因分析	排除方法
1	整机噪音过大	过滤棉是否装入	装入过滤棉
2	整机不运转	电源未接通	将机器插头牢靠插入电源插座，确保电源接通
		熔丝管熔断	更换熔丝管
3	整机运转，但雾化装置不能喷雾	雾化装置在清洗消毒中已变形	更换新雾化装置

		雾化装置喷口堵塞	
		雾化杯盖安装不正确	按雾化装置安装方法正确安装到位
		药液用完	重新加入适量药液
4	连接管中有水滴	药液加入过量或清洗连接管后未晾干	将连接管连置主机，开机后，用手指重复开闭连接管端口，以排除水滴
其他疑问请与供应商或制造商联系，或请专业人员维修			

附件清单

附件清单

主机	1 台
雾化装置	1 套
过滤棉	2 只
说明书	1 份
保修卡(客户信息卡)	1 份
合格证	1 份

配件及附件如有需要更换，请与产品供应商联系。

如客户需购置本产品配件或易损易耗件，请向本公司售后服务部门购买，在制造商认可的专业人员指导下实施更换。如客户实施自行购买、违规操作等行为，造成后果本公司概不负责。

废弃物、残渣的处理

对废弃主机、附件及另售品的处理方法应遵照当地政府的规定。

告知：

1. 对于操作者使用不当或没有按照说明书操作而造成的机器损坏和故障本公司不承担责任。
2. 当温度、电压和产品特性与指标定义的条件不同时，主机可能无法操作。
3. 产品性能可能随药液的特性（悬浊或高粘度）不同而变化。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质及其化合物或元素					
	铅及其化合物 ≤1000PPM	汞及其化合物 ≤1000PPM	镉及其化合物 ≤100PPM	六价铬及其化合物 ≤1000PPM	多溴联苯 ≤1000PPM	多溴联苯醚 ≤1000PPM
塑件外壳	○	○	○	○	○	○
压缩泵	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
雾化装置	○	○	○	○	○	○
焊锡	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 标准规定的限量要求以下。 注：钢材中含铅≤3500PPM，铝材中含铅≤4000PPM，铜材中含铅≤4%，所有包装类六种有毒有害物质含量均≤100PPM.						

【产品批号】见标签

【生产日期】见标签

【使用期限】压缩空气式雾化器：5 年；

【注册人/生产企业/售后服务单位】江苏星米医疗科技有限公司

【住所】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道805号中国医药城G132栋3层西南侧

【生产地址】泰州市医药高新技术产业开发区健康大道805号中国医药城G132栋3层西南侧
【邮政编码】225300

【联系方式】0523-86865598